


# Opticare®

## Instructions

Opticare eye drop dispenser targets the eye and squeezes the bottle

## Mode d'emploi

Le compte-gouttes ophthalmique cible l'œil et serre le flacon

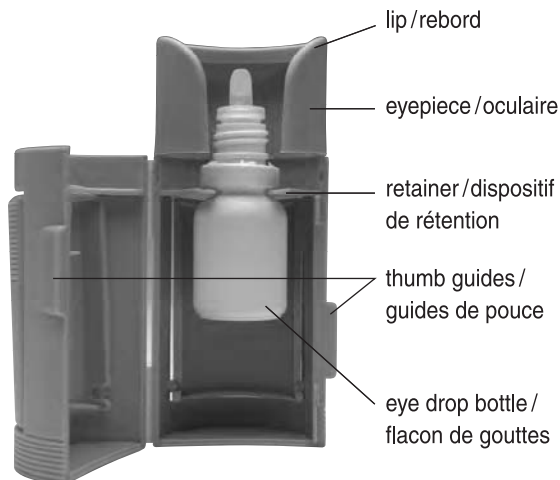

1. Open Opticare using thumb guides. Loosen bottle cap but do not remove.

1. Ouvrez l'Opticare à l'aide des guides de pouce. Desserrez le bouchon du flacon mais ne le retirez pas.



2. Place the bottle inside Opticare so that the retainer fits firmly around the base of the bottle neck.

2. Placez le flacon à l'intérieur de l'Opticare de façon à ce que le dispositif de rétention s'adapte fermement autour de la base du goulot du flacon.



2a. **Some** bottles (e.g. Travatan, Xalatan) require a bottle collar to ensure a secure fit. Slide collar (supplied) around the base of the bottle neck.

2a. **Certains** flacons (p. ex., Travatan, Xalatan) ont besoin d'un collier de flacon pour assurer un bon ajustement. Glissez le collier (fourni) autour de la base du goulot du flacon.



2b. Place bottle inside Opticare as per step 2. The optional collar sits on top of the retainer and the base of the bottle neck sits below the retainer.



3. Close Opticare by clicking sides together securely. Open eyepiece to remove bottle cap before use.



4. Use finger to pull down lower eye lid. Tilt head back and rest lip of eyepiece gently against upper eye socket. Gently squeeze the side panels to deliver drop(s) into the eye. Replace bottle cap after use.

*To ensure proper hygienic care, always wash Opticare in hot water before installing a new eye drop bottle.*

2b. Placez le flacon à l'intérieur de l'Opticare comme à l'étape 2. Le collier facultatif s'installe sur le haut du dispositif de rétention et la base du goulot du flacon s'installe en dessous.

3. Fermez l'Opticare en faisant cliquer les côtés ensemble. Ouvrez l'oculaire pour retirer le bouchon du flacon avant l'usage.

4. À l'aide du doigt, tirez vers le bas sur la paupière inférieure. Inclinez la tête vers l'arrière et reposez doucement le rebord de l'oculaire contre la cavité de l'œil. Appuyez doucement sur les panneaux latéraux pour envoyer une ou plusieurs goutte(s) dans l'œil. Remettez en place le bouchon du flacon après l'usage.

*Pour de bons soins hygiéniques, lavez toujours l'Opticare dans l'eau chaude avant d'installer un nouveau flacon de compte-gouttes.*

Made in England by/Fabriqué en Angleterre par

**Cameron Graham Ltd**

Unit B1, Crosland Road Industrial Estate, Netherton, Huddersfield, HD4 7DQ. Tel: +44 (0)1484 667 822  
Email: info@cameron-graham.co.uk  
www.cameron-graham.co.uk

Distributed by/Distribué par

**Australia/Australie**

Intelligent Health Systems  
Factory 2, 8-12 Coora Road  
South Oakleigh, Victoria 3166  
www.Intelligenthealthsystems.com.au

**Canada**

McArthur Medical Sales Inc.  
1846 5th Concession West  
Rockton, Ontario L0R 1X0  
www.mcarthurmedical.com

Opticare® is available on prescription in the UK.  
Opticare® may also be purchased at your pharmacy.  
Ask your pharmacist for PIP Code 033-3369.



UK Patent 2216802  
UK Registered Design 2014524  
US Patent D 345603  
Opticare® is a Registered Trademark

Brevet R.-U. 2216802  
Concept enregistré R.-U. 2014524  
Brevet américain D 345603  
Opticare® est une marque de commerce déposée